



CROSS I  
MicroCatheter

CROSS I  
MicroCatheter  
Legato®

血管壁での引っ掛かり、抵抗を考慮し、目的血管への送り込みのし易さにフォーカス。  
 術者の「技」を最大限に引き出すことを目的に開発した超選択的マイクロカテーテル、  
**それが“CROSS I” (クロスワン)です。**

# CROSS I


MicroCatheter

確かな治療へ導く「技」と「質」

### Total Balance



素材、設計、加工が臨床に与える影響を  
 考え、その中で最大限の性能が発揮出  
 来るバランス

### 製品仕様

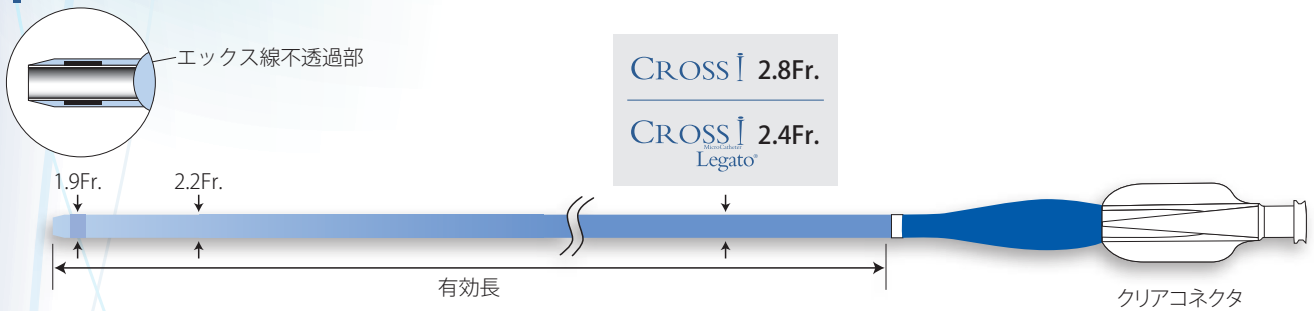

### 最先端部テーパ加工

血管分岐部や屈曲部での引っ掛かりを軽減

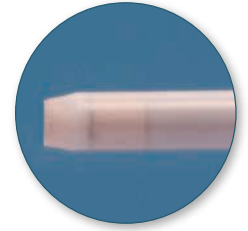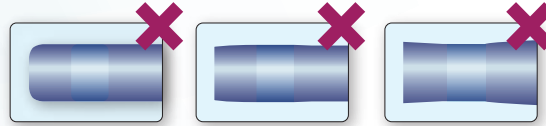

### 柔軟さの追求

微細で屈曲した血管走行にも  
 対応するフレックスチップを採用



### 最適な素材選択

視認性ストレス回避と選択性能の向上  
 目的血管挿入後の安定性を引き出す編組構造



### CROSS I Micro Catheter

カタログ番号	有効長	先端形状	外径 (エックス線不透過部/先端部/手元部)	内径	適合ガイドワイヤ 最大外径	最大耐圧 (先端開放時)	JANコード
MC16-S110RY	110cm	ストレート	0.645 / 0.73 / 0.93mm (1.9 / 2.2 / 2.8 Fr.)	0.55mm (0.022inch)	0.46mm (0.018inch)	6,895kPa (1,000psi)	4545428021061
MC16-S130RY	130cm						4545428021078
MC16-S150RY	150cm						4545428021085
MC16-A130RY	130cm	アングル					4545428021139
MC16-D130RY		ダブルアングル					4545428021191

### CROSS I Legato® Micro Catheter

カタログ番号	有効長	先端形状	外径 (エックス線不透過部/先端部/手元部)	内径	適合ガイドワイヤ 最大外径	最大耐圧 (先端開放時)	JANコード
MC16-S110RY3	110cm	ストレート	0.645 / 0.73 / 0.80mm (1.9 / 2.2 / 2.4 Fr.)	0.55mm (0.022inch)	0.46mm (0.018inch)	6,895kPa (1,000psi)	4545428027131
MC16-S130RY3	130cm						4545428027162

- 販売名: マイクロカテーテル
- 承認番号: 21700BZZ00138000
- 医療機器分類: 高度管理医療機器 (クラスIV)
- 一般名称: 中心循環系マイクロカテーテル
- 保険医療材料請求分類: マイクロカテ・OSB

- セット内容: マイクロカテーテル、ロックシリンジ(1mL、2.5mL)、シェイピングマンドレル、Yコネクタ
- エチレンオキシドガス滅菌済
- ※本品は再使用不可のディスposable製品です。
- ※本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
- ※仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

### 【製造販売元】

**PIOLAX** 株式会社 パイオラックス メディカル デバイス  
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

### 【商品に関するお問い合わせ先】

TEL: 045-517-9740 FAX: 045-811-8560