

品 種 表

プレート

カタログ番号	形状	サイズ	プレート厚	保険医療材料請求分類	JANコード
DS-100M	ストレート2穴	15.0 × 4.8 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-1	4545428022969
DS-104L	ストレート4穴	19.8 × 4.8 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-1	4545428022976
DX-200	ボックス4穴	12.7 × 16.3 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-1	4545428022990
DDY-36L	DYプレート6穴L	19.0 × 10.4 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-1	4545428023058
DB-014	バーホール14mm	φ 14.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-d-1	4545428023072
DB-018	バーホール18mm	φ 18.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-d-1	4545428023089
DB-020	バーホール20mm	φ 20.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-d-1	4545428023096
DB-305	バーホールドレーン	φ 20.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-d-1	4545428023065
DB-014W	バーホールW14mm	φ 14.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-d-1	4545428034375
DB-018W	バーホールW18mm	φ 18.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-d-1	4545428034382
DB-020W	バーホールW20mm	φ 20.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-d-1	4545428034399
DB-305W	バーホールドレーンW20mm	φ 20.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-d-1	4545428034405
DB-OOYA-S	バーホールマルチユース型S	27.0 × 20.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-d-1	4545428034290
DB-OOYA-M	バーホールマルチユース型M	33.0 × 26.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-d-1	4545428034306
DM-406M	ギャッププレートM	39.8 × 17.8 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428023140
DM-406L	ギャッププレートL	49.9 × 18.6 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428023157
PT-KEY-M	キーホールM(PTプレートM)	28.0 × 28.5 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428017798
PT-KEY-L	キーホールL(PTプレートL)	28.0 × 47.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428017804
PT-KEY-A	キーホールA	28.0 × 46.7 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428022037
PT-KEY-C	キーホールC	31.0 × 47.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428022051
PT-KEY-D	キーホールD	28.0 × 67.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428022068
PT-KEY-E	キーホールE	28.0 × 47.0 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428022075
PT-KEY-F	キーホールF	28.0 × 28.5 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428022082
DM-28-NA	テリオナルメッシュAタイプ	57.1 × 29.1 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428034481
DM-28-NB	テリオナルメッシュNタイプ	79.2 × 30.8 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428034474
PM-400	メッシュ1	135.4 × 87.3 mm	0.3mm	固定用内副子・F2-a-2	4545428009250

スクリュー

カタログ番号	形状	サイズ	プレート厚	保険医療材料請求分類	JANコード
DSN-15-03-1	セルフドリリングスクリュー(1個入り)	φ 1.5 × 3 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428034245
DSN-15-03-4	セルフドリリングスクリュー(4個入り)	φ 1.5 × 3 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428034252
DSN-15-04-1	セルフドリリングスクリュー(1個入り)	φ 1.5 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428027476
DSN-15-04-2	セルフドリリングスクリュー(2個入り)	φ 1.5 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428027483
DSN-15-04-4	セルフドリリングスクリュー(4個入り)	φ 1.5 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428027506
DSN-15-04-6	セルフドリリングスクリュー(6個入り)	φ 1.5 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428027513
DSN-15-04-8	セルフドリリングスクリュー(8個入り)	φ 1.5 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428027520
DSN-15-04-10	セルフドリリングスクリュー(10個入り)	φ 1.5 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428027537
DSN-15-04-12	セルフドリリングスクリュー(12個入り)	φ 1.5 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428033583
DTN-16-04-1	ノーマルスクリュー(1個入り)	φ 1.6 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428027544
DTN-16-04-2	ノーマルスクリュー(2個入り)	φ 1.6 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428027551
DTN-16-04-4	ノーマルスクリュー(4個入り)	φ 1.6 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428027568
DTN-16-04-6	ノーマルスクリュー(6個入り)	φ 1.6 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428027575
DTE-18-04-1	エマーゼンシーンスクリュー(1個入り)	φ 1.8 × 4 mm	—	固定用内副子・F1-a	4545428027629

- 販売名：プレートT
- 承認番号：21600BZZ00251000
- 医療機器分類：高度管理医療機器(クラスⅢ)
- 一般的な名称：体内固定用プレート
- エチレンオキサイドガス滅菌済み

本品は再使用不可の Disposable 製品です。
本製品をご使用の際は、添付文書をよく読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
仕様・外觀につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

Original Set オリジナルセット(滅菌済)

ご希望の組み合わせでセット化が可能です。

(セット品一例)

既存セット	カタログ番号	セット内容	個数
DTセット010W	DT-010W	ボックス4穴 バーホールW18mm セルフドリリングスクリュー	×1 ×2 ×6



プレートの枚数、種類、スクリューの数量を、ご希望に合わせた組み合わせでお届けします。



Tools 工具類(未滅菌)



ピーティーカーター

カタログ番号：CS-01
JANコード：4545428011802
販売名：ピーティーカーター
届出番号：14B1X00016000003
医療機器分類：一般医療機器(クラスI)
一般的な名称：骨手術用器械



ピーティーパーダー

カタログ番号：BK-01
JANコード：4545428011819
販売名：ピーティーパーダー
届出番号：14B1X00016000004
医療機器分類：一般医療機器(クラスI)
一般的な名称：骨手術用器械



ラウンドパーダー

カタログ番号：RB-01
JANコード：4545428025922
販売名：ラウンドパーダー
届出番号：14B1X00016000013
医療機器分類：一般医療機器(クラスI)
一般的な名称：骨手術用器械




ピーティードライバー (ドライバービット)

カタログ番号：DB-05
JANコード：4545428027452
販売名：ピーティードライバー
届出番号：14B1X00016000002
医療機器分類：一般医療機器(クラスI)
一般的な名称：ドライバー及び抜出器



ピーティードリルビット

カタログ番号：SB-12(φ1.2mm)
JANコード：4545428017910
販売名：ピーティードリルビット
届出番号：14B1X00016000005
医療機器分類：一般医療機器(クラスI)
一般的な名称：手術用ドリルビット

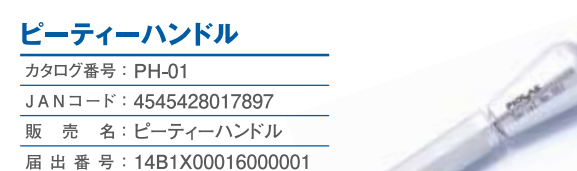

ピーティーパーハンドル

カタログ番号：PH-01
JANコード：4545428017897
販売名：ピーティーパーハンドル
届出番号：14B1X00016000001
医療機器分類：一般医療機器(クラスI)
一般的な名称：骨手術用器械

ピーティーパー滅菌ケース

カタログ番号：04G9-0017
JANコード：4545428011826
販売名：ピーティーパー滅菌ケース
※カッター・パーダー・ドライバー類をまとめて収納できます。


※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】
PIOLAX 株式会社 **パイオラックス メディカル デバイス**
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

DO FIT PLATE SYSTEM

0.3mm プレート&スクリューシステム

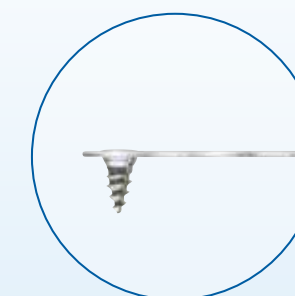

DO FIT PLATE SYSTEM

厚さ0.3mmのプレートシステムは頭皮への刺激を抑えることを狙っています。
さらにスクリーヘッドを平滑化することで、プレートからの突出を抑え、整容面を考慮しています。

Single Plate プレート 単品 (滅菌済)

※Single Plateの写真は原寸です。



ストレート2穴

カタログ番号：DS-100M



ストレート4穴

カタログ番号：DS-104L



ボックス4穴

カタログ番号：DX-200



DYプレート6穴L

カタログ番号：DDY-36L



バーホール14mm

カタログ番号：DB-014



バーホール18mm

カタログ番号：DB-018



バーホール20mm

カタログ番号：DB-020



バーホールドレイン

カタログ番号：DB-305



バーホールW14mm

カタログ番号：DB-014W



バーホールW18mm

カタログ番号：DB-018W



バーホールW20mm

カタログ番号：DB-020W



バーホールドレインW20mm

カタログ番号：DB-305W



バーホールマルチユース型S

カタログ番号：DB-00YA-S



バーホールマルチユース型M

カタログ番号：DB-00YA-M



ギャッププレートM

カタログ番号：DM-406M



ギャッププレートL

カタログ番号：DM-406L

Key Hole Plate キーホールプレート 単品 (滅菌済)

※Key Hole Plateの写真は原寸です。

キーホール頭蓋骨固定用プレート

コメカミ部の骨固定に優れたプレートです。

プレート厚わずか0.3mm!

骨形状に合わせた圧迫変形がその場で
行える頭蓋骨固定用のチタン製プレートです。

頻回に行なわれる前頭側頭開頭法において、術後のコメカミ部陥没の恐れがあります。
本製品は、美容的完成度を高めるために作られた“キーホール頭蓋骨固定用プレート”です。




キーホールプレートの特長

- ・コメカミ部固定に適した形状を有する。
- ・骨形状に合わせた圧迫変形がその場で可能。
- ・遊離骨のプレート固定後一連の作業で装着が可能。
- ・スクリーによる確実な固定が可能。
- ・被覆する側頭筋固定の縫合支点到。



キーホールプレート固定前

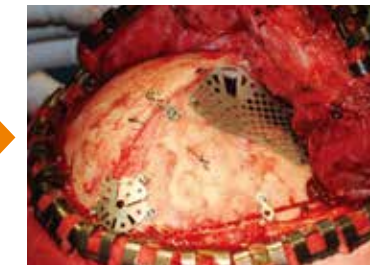


キーホールプレート固定後




キーホールM (PTプレートM)

カタログ番号：PT-KEY-M

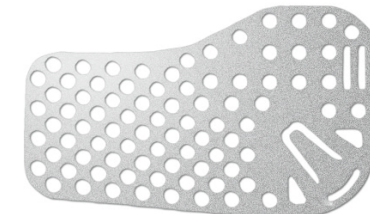


キーホールL (PTプレートL)

カタログ番号：PT-KEY-L

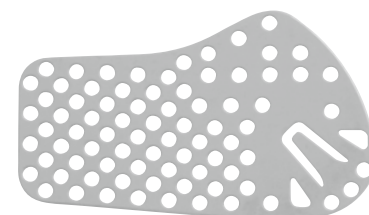


キーホールA

カタログ番号：PT-KEY-A

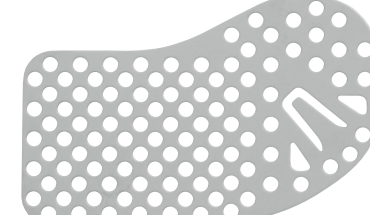


キーホールC

カタログ番号：PT-KEY-C

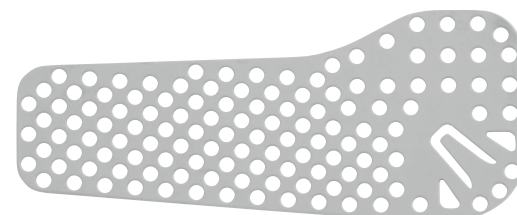


キーホールD

カタログ番号：PT-KEY-D

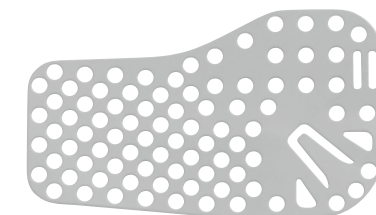

キーホールE


カタログ番号：PT-KEY-E

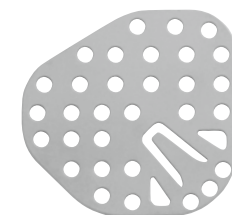

キーホールF


カタログ番号：PT-KEY-F

Pterional Mesh テリオナルメッシュ (滅菌済)

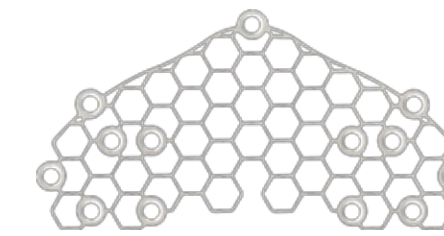

テリオナルメッシュAタイプ


カタログ番号：DM-28-NA

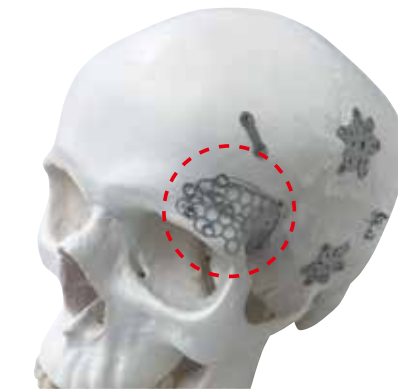

テリオナルメッシュNタイプ

カタログ番号：DM-28-NB


Mesh Plate メッシュ (滅菌済)

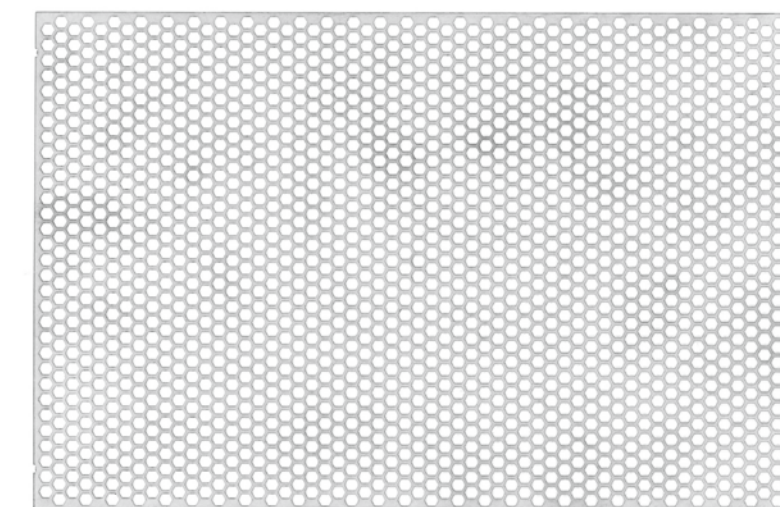

メッシュ1

カタログ番号：PM-400

Screw スクリュー (滅菌済)

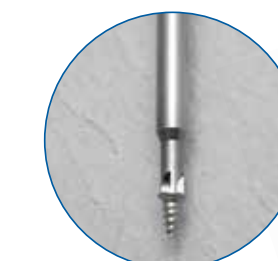

嵌合カアッパ



セルフドリリングスクリュー

カタログ番号 品種表参照



ノーマルスクリュー

カタログ番号 品種表参照

※スクリューは、必要な数量の包装単位を選びご使用ください。

使いやすいスクリュー専用ケース

スクリューの収納は千鳥状に並んでおり、
飛び出しを防止するためにフタはスライド形式になって
いるので、ひとつずつ確実に取り出すことができます。

