

Micro Guidewire

# Labyrinth

ラビリンス

「“肝臓という迷宮”を解き明かすガイドワイヤ」を  
コンセプトに、臨床現場からのリクエストや呟きを基に開発した

0.014inch マイクロガイドワイヤ。

それが“Labyrinth” (ラビリンス) です。

## 製品特徴

### 先端部「特殊コイル構造」採用

先端部の柔軟性とリシェイプの行ない易さを考慮

### 0.014inch均一外径


微細血管への挿入性を考慮

### 全長フルジャケット&親水性コーティング

使用耐久性及びマイクロカテーテルとの相性を考慮

### 全長にわたる緩やかな剛性バランス

操作性全般を考慮

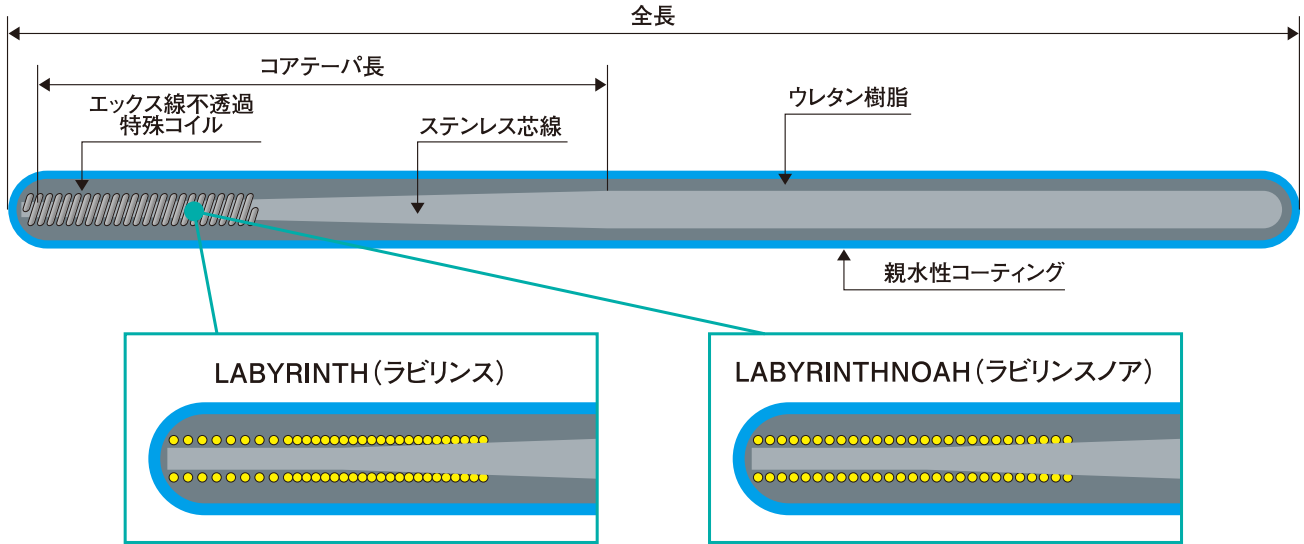

### LABYRINTH(ラビリンス)

カタログ番号	全長	先端形状	外径	エックス線不透過長	コアテーパ長	JANコード
LRT14-135S	135cm	ストレート	0.36mm (0.014inch)	5cm	36cm	4545428018832
LRT14-165S	165cm					4545428018825
LRT14-180S	180cm					4545428018801

### LABYRINTHNOAH(ラビリンスノア)

カタログ番号	全長	先端形状	外径	エックス線不透過長	コアテーパ長	JANコード
LRT14-145SN	145cm	ストレート	0.36mm (0.014inch)	5cm	36cm	4545428025052
LRT14-165SN	165cm					4545428021689
LRT14-180SN	180cm					4545428021672
LRT14-180AN		アングル	4545428021702			

- 販売名：パイオラックス親水性ガイドワイヤー
- 承認番号：20800BZZ00001000
- 医療機器分類：高度管理医療機器(クラスⅣ)
- 一般的名称：心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤー
- 保険医療材料請求分類：血管造影用ガイドワイヤー(3)微細血管用

- エチレンオキサイドガス滅菌済み
- 本品は再使用不可のディスposable製品です。  
 本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。  
 仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】

**PIOLAX**

株式会社 **パイオラックス メディカル デバイス**  
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560