

Run & Run



Micro Guidewire

PIOLAX

製品特長

1 抜群のトルク性能

血管分岐へ確実に入れ分けるためにトルクコントロール性の良いステンレスシャフトを採用

2 先端から3cmのリシェイプ機能

様々な血管バリエーションへのアプローチを可能とするため、リシェイプ機能を採用

3 全長にわたる親水性コーティング

潤滑性を増すことで、マイクロカテーテルの追従性を向上

4 柔軟でコシのあるミディアム・ソフトシャフト

テンションが掛かりすぎることによるマイクロカテーテルの操作性低下を防止

Run&Run

● 0.016inchの均一な外径

マイクロカテーテル先端内腔とのクリアランスをより少なくするための均一な外径

Run&Run Torpede


● 先端より0.016inch→0.018inch→0.016inchのユニークな外径変化

マイクロガイドワイヤとしての選択性及び操作性を損なわず、内腔差を減らす工夫

● 内径0.020inch以上のマイクロカテーテルに適応


1本で選択的及び造形能強化型両方のカテーテルに使用可能

Run&Run

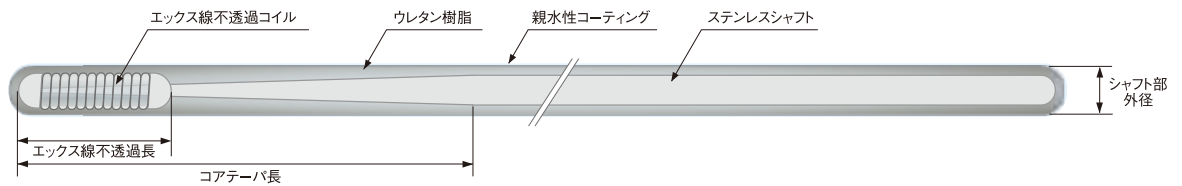

カタログ番号	全長	先端形状	外径 (シャフト部)	エックス線不透過長	コアテーパー長	JANコード
RUN165-16	165cm	ストレート	0.41mm (0.016inch)	3cm	40cm	4545428004569
RUN180-16	180cm					アングル
RUN180-16A						

Run&Run Torpede

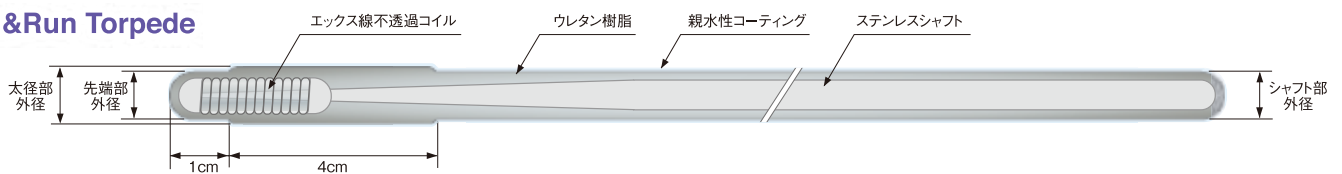

カタログ番号	全長	先端形状	外径 (先端部/太径部/シャフト部)	エックス線不透過長	コアテーパー長	JANコード
RUN165-18T	165cm	ストレート	0.41/0.46/0.41mm (0.016/0.018/0.016inch)	3cm	40cm	4545428007393
RUN180-18T	180cm					アングル
RUN180-18TA						

- 販売名: パイオラックス親水性ガイドワイヤー
- 承認番号: 20800BZZ00001000
- 医療機器分類: 高度管理医療機器(クラスIV)
- 一般的名称: 心臓・中心循環系カテーテルガイドワイヤー
- 保険医療材料請求分類: 血管造影用ガイドワイヤー・微細血管用

- エチレンオキシドガス滅菌済み
 - セット内容: ガイドワイヤ、シェイパ、トルクデバイス、インサータ
- 本品は再使用不可のディスposable製品です。
本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】
PIOLAX 株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
 TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560