



SIRABE

MICRO CATHETER SYSTEM

PIOLAX

製品特長

1 シリコンコートPTFEライナの採用


併用医療機器のスムーズな挿入、マイクロガイドワイヤの操作性、追従性を発揮

2 クリアハブの採用

マイクロガイドワイヤ、塞栓物質等のスムーズな挿入性を発揮

PURE SELECTIVE 2.2Fr.


- 最先端に「耐Kink Soft Tip」構造を採用

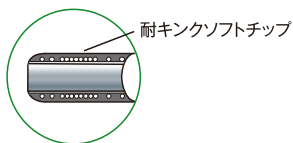

- 形状バリエーションのラインナップ




エックス線不透過部外径

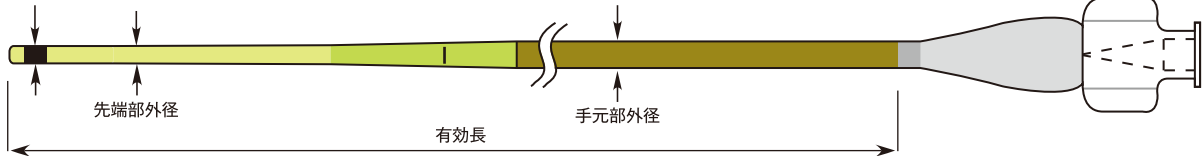

PREMIUM FLOW 2.6Fr.

- 特殊ブレード構造を採用

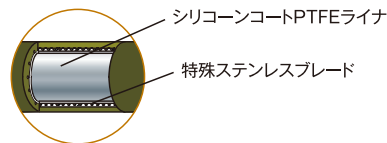

- 造影能強化型としては最も細径の2.6Fr.を採用

PURE SELECTIVE

カタログ番号	有効長	先端形状	外径 (エックス線不透過部/先端部/手元部)	内径	適合ガイドワイヤ最大外径	最大耐圧 (先端開放時)	JANコード
MC18-S110	110cm	ストレート	0.74/0.74/0.94mm (2.2/2.2/2.8Fr.)	0.54mm (0.021inch)	0.46mm (0.018inch)	6,895kPa (1,000psi)	4545428010485
MC18-S130	130cm						4545428010492
MC18-W110	110cm	スパイラル					4545428010546
MC18-W130	130cm						4545428010553
MC18-D110	110cm	ダブルアングル					4545428010515
MC18-D130	130cm						4545428010522

PREMIUM FLOW

カタログ番号	有効長	先端形状	外径 (エックス線不透過部/先端部/手元部)	内径	適合ガイドワイヤ最大外径	最大耐圧 (先端開放時)	JANコード
MC21-S105	105cm	ストレート	0.87/0.90/0.93mm (2.6/2.7/2.8Fr.)	0.70mm (0.027inch)	0.54mm (0.021inch)	6,895kPa (1,000psi)	4545428017941
MC21-S125	125cm						4545428017965
MC21-S145	145cm						4545428017989

■ 販売名：マイクロカテーテル
 ■ 承認番号：21700BZZ00138000
 ■ 医療機器分類：高度管理医療機器(クラスⅣ)
 ■ 一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル
 ■ 保険医療材料請求分類：PURE SELECTIVE マイクロカテ・OSB
 PREMIUM FLOW マイクロカテ・OZ

■ セット内容：マイクロカテーテル、シリンジ(2.5mL)、シェイピングマンドレル
 ■ エチレンオキサイドガス滅菌済み
 ※本品は再使用不可のディスポーザブル製品です。
 ※本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
 ※仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】

PIOLAX

株式会社 **パイオラックス** メディカル デバイス

〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

C-SIRABE1705第1版SW