


PIOLAX Hydrophilic Guidewire

SURF

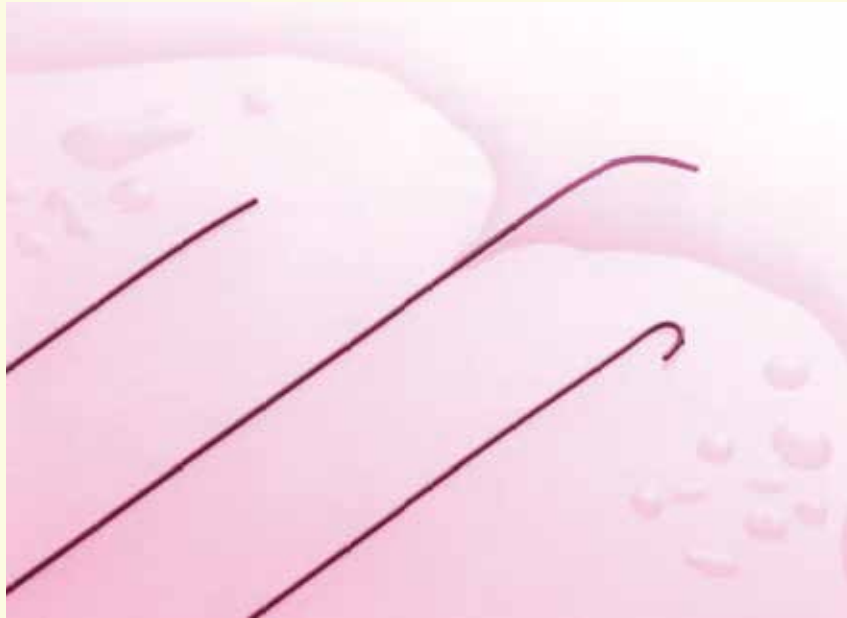

1 ラウンド加工された柔軟な最先端


- 最先端部ラウンド加工により、血管損傷リスクを低減します。
- 血管壁への接触時、滑らかなワイヤの動きが得られます。

2 用途に合わせた二種類のシャフト特性

- 復元性(耐変形性)に優れたチタンニッケル芯線タイプ。
- トルク伝達性に優れたステンレス芯線タイプ。

■ステンレス芯線タイプの特性■

- ・チタンニッケル芯線と比較し、同サイズでも高い剛性が出ます。
- ・形状付が可能だけでなく、チタンニッケルのような弾性がないため、血管内挿入後の安定性に優れます。カテーテル交換等重要なシーンでその特性が活かされます。

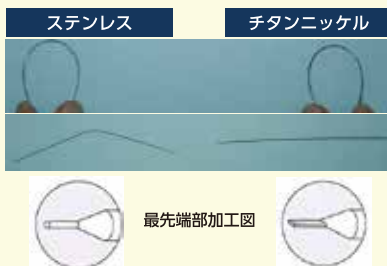

3 先端付形が可能な樹脂ワイヤ (ステンレス芯線)

- 任意の形状付けが可能なステンレス芯線タイプ。



4 側枝にかかりにくい先端Jタイプ

- 側枝にかかりにくいJ型形状を準備いたしました。



2 J: 半径 2mm

5 滑らかな表面潤滑性と良好な視認性

- 体内留置用カテーテルで実績のあるPVPコーティングを採用。
- タングステン入りウレタン樹脂を使用し、シャフトの視認性を向上させました。

■ 製品規格

【ステンレス芯線】

カタログ番号	外径	全長	シャフト特性	先端形状	JANコード
GSHA-2518	0.64mm (0.025inch)	180cm	ハード	アングル	4545428006259
GSHA-2522		220cm			4545428007164
GSSA-3215	0.81mm (0.032inch)	150cm	スタンダード		4545428002817
GSFA-3515	0.89mm (0.035inch)	150cm	フロッピー		4545428002978
GSSS-3515			スタンダード	ストレート	4545428003371
GSSA-3515		アングル		4545428002893	
GSSS-3518		180cm	スタンダード	ストレート	4545428006709
GSSA-3518				アングル	4545428002909

【チタンニッケル芯線】

カタログ番号	外径	全長	シャフト特性	先端形状	JANコード	
GNSA-2508	0.64mm (0.025inch)	80cm	スタンダード	アングル	4545428003548	
GNSA-2515		150cm			4545428003579	
GNSA-2518		180cm			4545428003586	
GNFA-3215	0.81mm (0.032inch)	150cm	フロッピー		4545428003883	
GNSA-3215			スタンダード		4545428003654	
GNSA-3508	0.89mm (0.035inch)	80cm	スタンダード		4545428003708	
GNHA-3508			ハード		4545428007270	
GNSA-3510		100cm	スタンダード		4545428003715	
GNFA-3512		120cm	フロッピー		4545428005597	
GNFA-3515		150cm	150cm		フロッピー	4545428003906
GNSS-3515					スタンダード	ストレート
GNSA-3515			スタンダード		アングル	4545428003739
GNHS-3515			ハード	ストレート	4545428013707	
GNHA-3515		180cm	スタンダード	アングル	4545428003920	
GNSA-3518				アングル	4545428003746	
GN2J-3518				J型	4545428006181	
GNHA-3518		ハード	アングル	4545428003937		

- 販売名: パイオラックス親水性ガイドワイヤー
- 承認番号: 20800BZZ00001000
- 医療機器分類: 高度管理医療機器(クラスⅣ)
- 一般的名称: 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤー
- 保険医療材料請求分類: 血管造影用ガイドワイヤー 一般用
: 血管造影用ガイドワイヤー 交換用

- エチレンオキシドガス滅菌済み
- 本品は再使用不可のディスposable製品です。
- 本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
- 仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】



株式会社 **パイオラックス メディカル デバイス**
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560