


■ デリバリーシステム

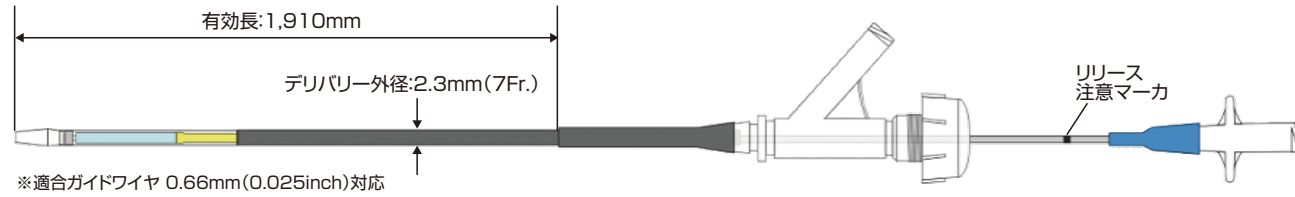

カタログ番号	カバータイプ	ステント形状	ステントサイズ	JANコード
RC08-60	フルカバー		Φ8mm×60mm	4545428038083
RC08-80			Φ8mm×80mm	4545428038090
RC10-60			Φ10mm×60mm	4545428038106
RC10-80			Φ10mm×80mm	4545428038113
DF08-60	パーシャルカバー		Φ8mm×60mm	4545428038120
DF08-80			Φ8mm×80mm	4545428038137
SF08-100	フルカバー		Φ8mm×100mm	4545428038724
SF08-120			Φ8mm×120mm	4545428038731
SP08-100	パーシャルカバー		Φ8mm×100mm	4545428038144
SP08-120			Φ8mm×120mm	4545428038151

(ステントサイズは公称値)

- 販売名: カバードバイルラッシュアドバンス
- 承認番号: 30200BZX00149000
- 医療機器分類: 高度管理医療機器(クラスⅢ)
- 一般的名称: 胆管用ステント
- 保険医療材料請求分類: 胆道ステントセット 自動装着システム付 永久留置型 カバーあり

- エチレンオキサイドガス滅菌済み
- 本品は再使用不可のディスポーザブル製品です。
- 本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
- 仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。



※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】
株式会社 **PIOLAX** バイオラックス メディカル デバイス
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

C-CBA-12110V1AD

細径化された レーザーカットカバードメタリックステント

1 細径デリバリーシステム



細径デリバリー(7Fr.)でありながら、ステントリリース時の
アウターシースの伸展を軽減しております。
プッシュビリティと耐キック性を向上していますので、
ステント留置時の術者のストレスを軽減します。

2 Covered Laser Cut Stent

ステントはゼロショートニングのレーザーカットタイプの為、
目的留置部位への位置決めが容易となります。
国産メーカーならではの、丁寧な加工でステント本体、
カバー膜を仕上げております。


3 豊富なラインナップ

様々な症例に対応できるよう、
ステント径・長だけではなく
形状も4種類の形状から選択いただけます。

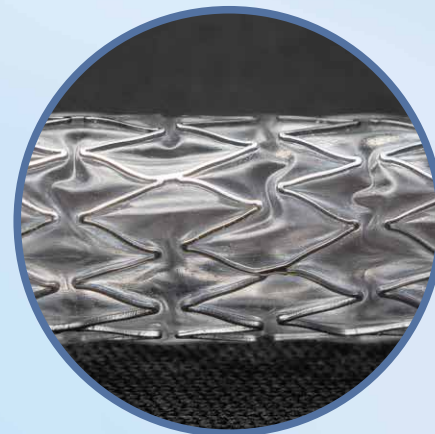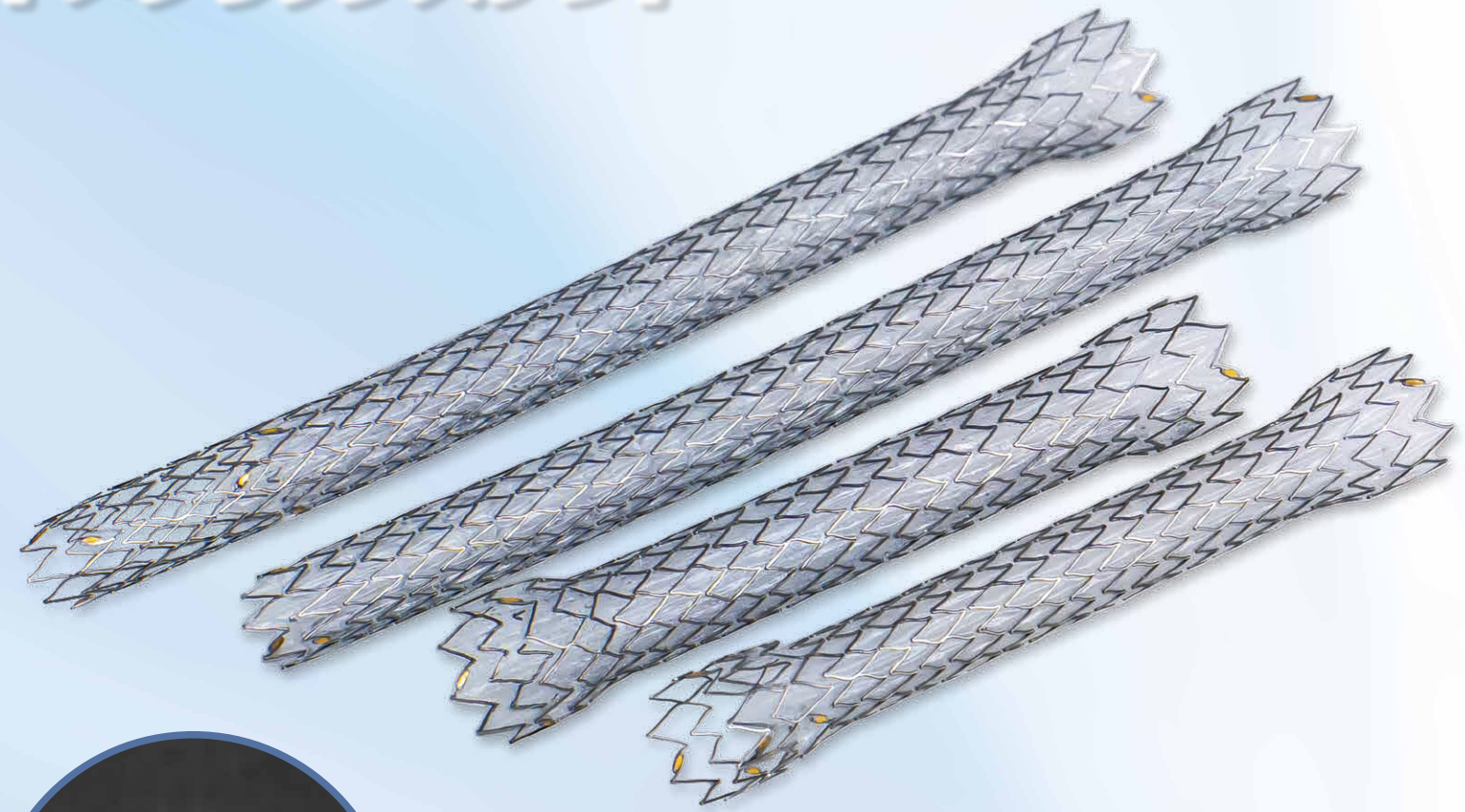

シリコンカバー

カバー膜でステントを挟み込むことにより、ステント
からカバー膜が剥がれることを軽減し、カバー機能
の耐久性を高めています。

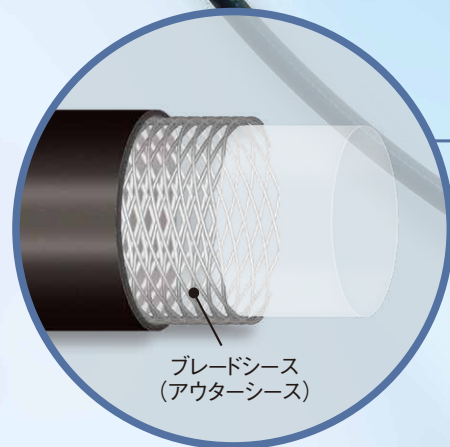

ブレードシース
(アウターシース)

ブレード入りアウターシース

アウターシースに耐キック性に優れた3層構造をも
つブレードシースを採用。リリース時に起こるアウ
ターシースの伸展を軽減し、スムーズなステント展
開をサポートします。

ギャップレスインナーカテーテル

ステントマウント部とインナーカテーテルの剛性バ
ランスのギャップを最小限に抑えることで、スムーズ
なステントデリバリー性能を提供します。



狭窄突破性能にこだわった先端チップ

スムーズにテーパ加工された先端チップは併用ガイド
ワイヤとの段差を最小限にしています。
また、先端チップ最先端部にはマイクロカテーテルに採用
しているペンシル加工を施すことにより、スムーズなステ
ントデリバリーを実現しました。

