

# MagicTome


マジックトーム



Multifunction  
Sphincterotome



Double Guide

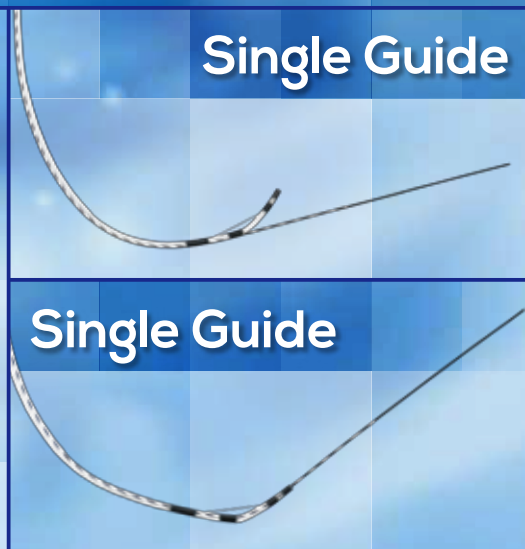



Single Guide

Single Guide

# 多機能パピロームによる通常手技のサポート


～新たな膵管ガイドワイヤ法の展開～

## 製品仕様図

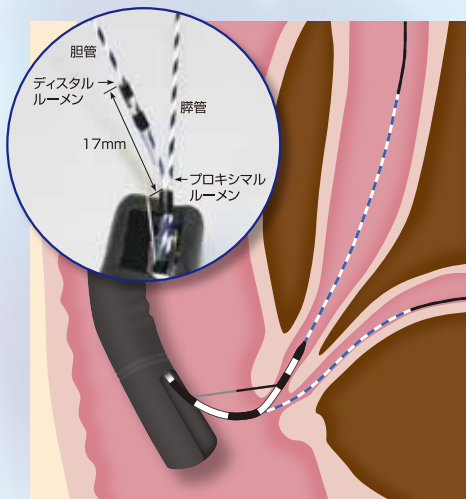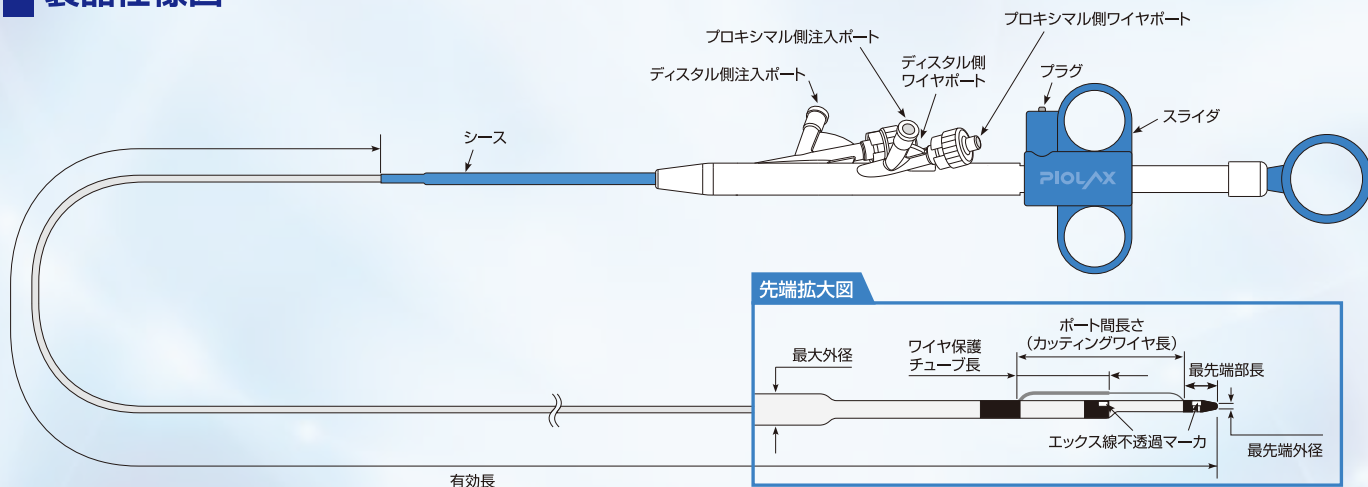

### 膵管ガイドワイヤ法

ダブルガイドワイヤ対応と11時の方向へアプローチが可能なルーメン配置の実現。

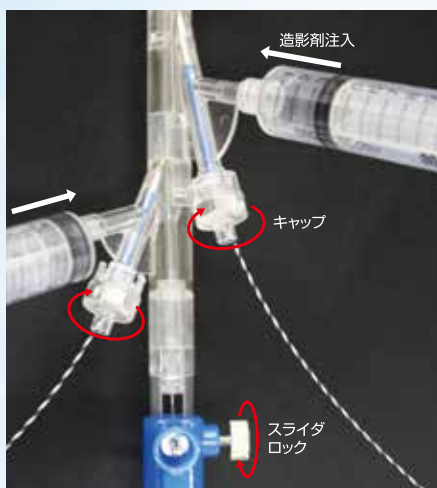

### 3D一体構造ハンドル

ガイドワイヤを挿入状態での造影とスライダロックによるスウィングアップの保持にてガイドワイヤ操作が可能。



### カッティングワイヤ構造

ワイヤ保護チューブによる周辺組織の損傷防止とスライダ操作による撓み調整が可能。

カタログ番号	最先端外径	最先端部長	ポート間長さ (カッティングワイヤ長)	ワイヤ保護チューブ長	最大外径	適合ガイドワイヤ最大外径	有効長	JANコード
MT-4817-25	1.6mm (4.8Fr.)	7mm	20mm	10mm	2.5mm (7.5Fr.)	ディスタル側: 0.66mm (0.025inch) プロキシマル側: 0.66mm (0.025inch)	1,850mm	4545428034740

■販売名: マジックトーム  
 ■認証番号: 226AFBZX00166000  
 ■医療機器分類: 管理医療機器 (クラスII)  
 ■一般的名称: 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具

■エチレンオキサイドガス滅菌済み  
 本品は再使用不可のディスposable製品です。  
 本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。  
 仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】

**PIOLAX**

株式会社 **パイオラックス** メディカル デバイス  
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

C-MT1710第1版SW