




LOGOS **SWITCH**
Micro Balloon Catheter

カテーテリゼーション困難な血管枝へ
 選択的な薬液等の注入を行うことを目的に開発した
 プロキシマル“サイドホール付き”マイクロバルーンカテーテル
 一時的な血流改変によりターゲット血管をピンポイントに狙う
“D.B.S.” Concept (Distal Blocking Selection)
 それが**“LOGOSSWITCH®”** (ロゴススイッチ®) です。

■ 製品特徴

- バルーン拡張時にバルーン部分のシャフト内腔が閉塞し、サイドホールからのみ注入が可能
 (プロキシマルマーカ上にサイドホールが開口)
- 4Fr.血管造影用カテーテル(適合ガイドワイヤ:0.038inch)に使用可能
- 4段階に拡張可能なマイクロバルーン(φ3mm・φ4mm・φ5mm・φ6mm)
- インジェクタ使用可能(※バルーン収縮時のみ)
- マイクロカテーテル仕様による良好なトラッカビリティ

■ シェーマ

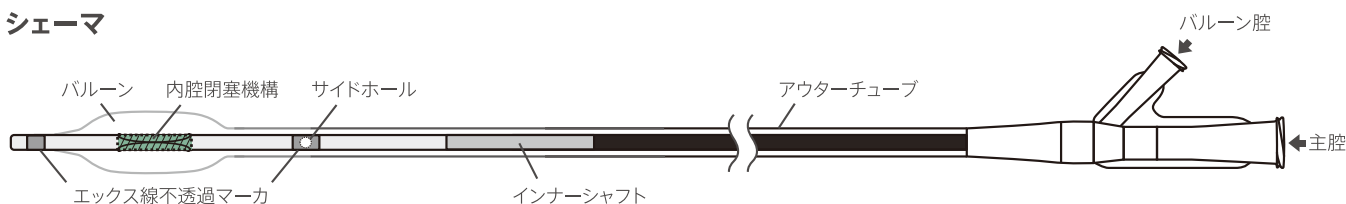

■ LOGOSSWITCH® (ロゴススイッチ®)

カタログ番号	有効長	内径	先端部外径	手元部外径	適合ガイドワイヤ最大外径	バルーン長	バルーン外径	最大耐圧※	JANコード
LS14-125	125cm	0.48mm (0.019inch)	0.68mm (2.0Fr.)	0.94mm (2.8Fr.)	0.36mm (0.014inch)	8mm-13mm	3mm-6mm	4,137kPa (600psi)	4545428035693

※バルーンが完全に収縮している状態であり、且つ、内腔が完全に開放されている状態にあるときの最大耐圧

- 販売名: ロゴススイッチ
- 承認番号: 22800BZX00090000
- 医療機器分類: 高度管理医療機器(クラスⅣ)
- 一般的名称: 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル
- 保険医療材料請求分類: 血管内手術用カテーテル・オクリュージョンカテーテル・特殊型
- バルーン用アクセサリ×1セット
 主腔用シリンジ1mL×1本
 拡張用シリンジ1mL×1本
 プライミング/収縮用シリンジ30mL×1本
 接続チューブ×1本
 ストップコック×1個
- エチレンオキサイドガス滅菌済み

本品は再使用不可の Disposable 製品です。
 本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
 仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 本製品は、「横浜市成長発展分野育成支援助成金」を受けて開発しました。

LOGOSSWITCH®, ロゴススイッチ®は株式会社バイオラックスメディカルデバイスの登録商標です。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】
PIOLAX 株式会社 **バイオラックス メディカル デバイス**
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
 TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560