



Ordering Information

Train Long Tip

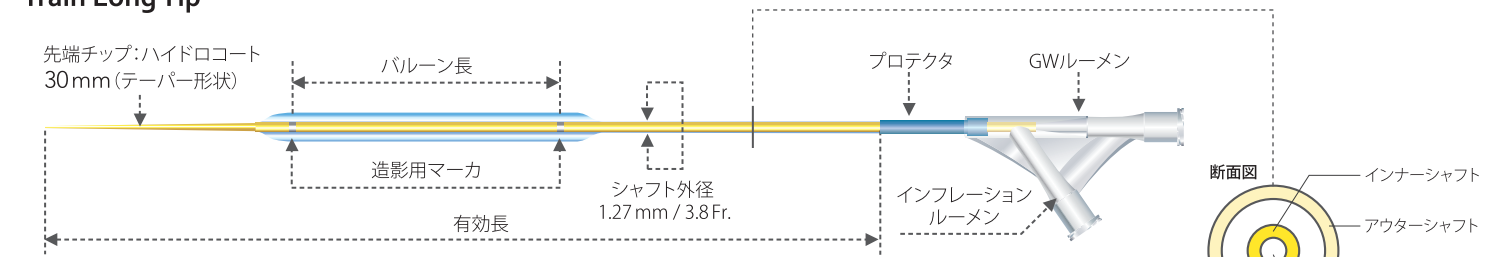

Train Short Tip

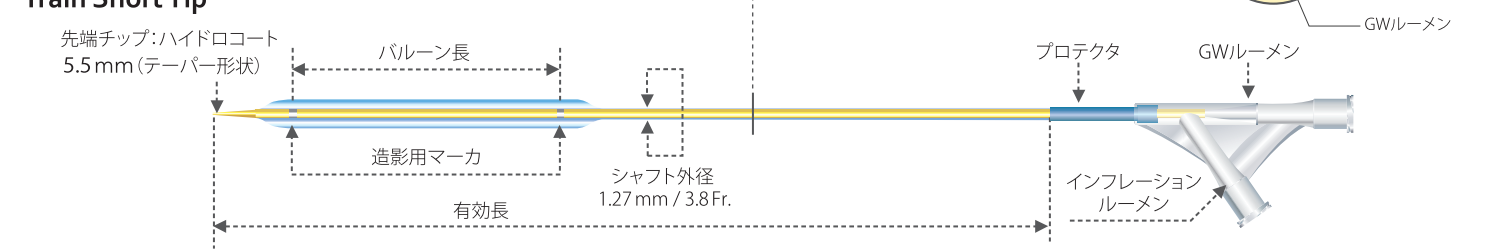

製品名	カタログ番号	カテーテル 有効長	バルーン径	バルーン長	推奨拡張圧	最大拡張圧	適合ガイドワイヤ	適合シース
Train Long Tip	TRN040-4020F	40 cm	4.0 mm	2 cm	1,418 kPa (14 atm)	2,027 kPa (20 atm)	0.46 mm (0.018 inch)	1.34 mm (4 Fr.)
	TRN040-4040F			4 cm				
	TRN040-5020F		5.0 mm	2 cm		2,027 kPa (20 atm)		
	TRN040-5040F			4 cm				
	TRN040-6020F		6.0 mm	2 cm		1,824 kPa (18 atm)		
	TRN040-6040F			4 cm				
	TRN080-4020F	80 cm	4.0 mm	2 cm		2,027 kPa (20 atm)		
	TRN080-4040F			4 cm				
	TRN080-5020F		5.0 mm	2 cm		2,027 kPa (20 atm)		
	TRN080-5040F			4 cm				
	TRN080-6040F		6.0 mm	4 cm		1,824 kPa (18 atm)		
Train Short Tip	TRNS040-4040F	40 cm	4.0 mm	4 cm	1,418 kPa (14 atm)	2,027 kPa (20 atm)	0.46 mm (0.018 inch)	1.34 mm (4 Fr.)
	TRNS040-5040F		5.0 mm			2,027 kPa (20 atm)		
	TRNS040-6040F		6.0 mm			1,824 kPa (18 atm)		
	TRNS080-4040F	80 cm	4.0 mm			2,027 kPa (20 atm)		
	TRNS080-5040F		5.0 mm			2,027 kPa (20 atm)		
	TRNS080-6040F		6.0 mm			1,824 kPa (18 atm)		

販売名：PTA バルーンカテーテルⅡ

承認番号：30200BZX00070000

医療機器分類：高度管理医療機器（クラスⅣ）

一般的名称：バルーン拡張式血管形成術用カテーテル

保険医療材料請求分類：PTA カテ・一般型・特殊型

■本品は再使用不可のディスポーザブル製品です。

■本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。

■仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■付属品・在庫状況は担当営業にお問い合わせください。

【販売元】

PIOLAX 株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3


【製造販売元】

フィルメック株式会社
〒463-0024 愛知県名古屋守山区脇田町1703番地

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

※本製品につきましては、販売元もしくは取り扱い販売店までお問合せください。

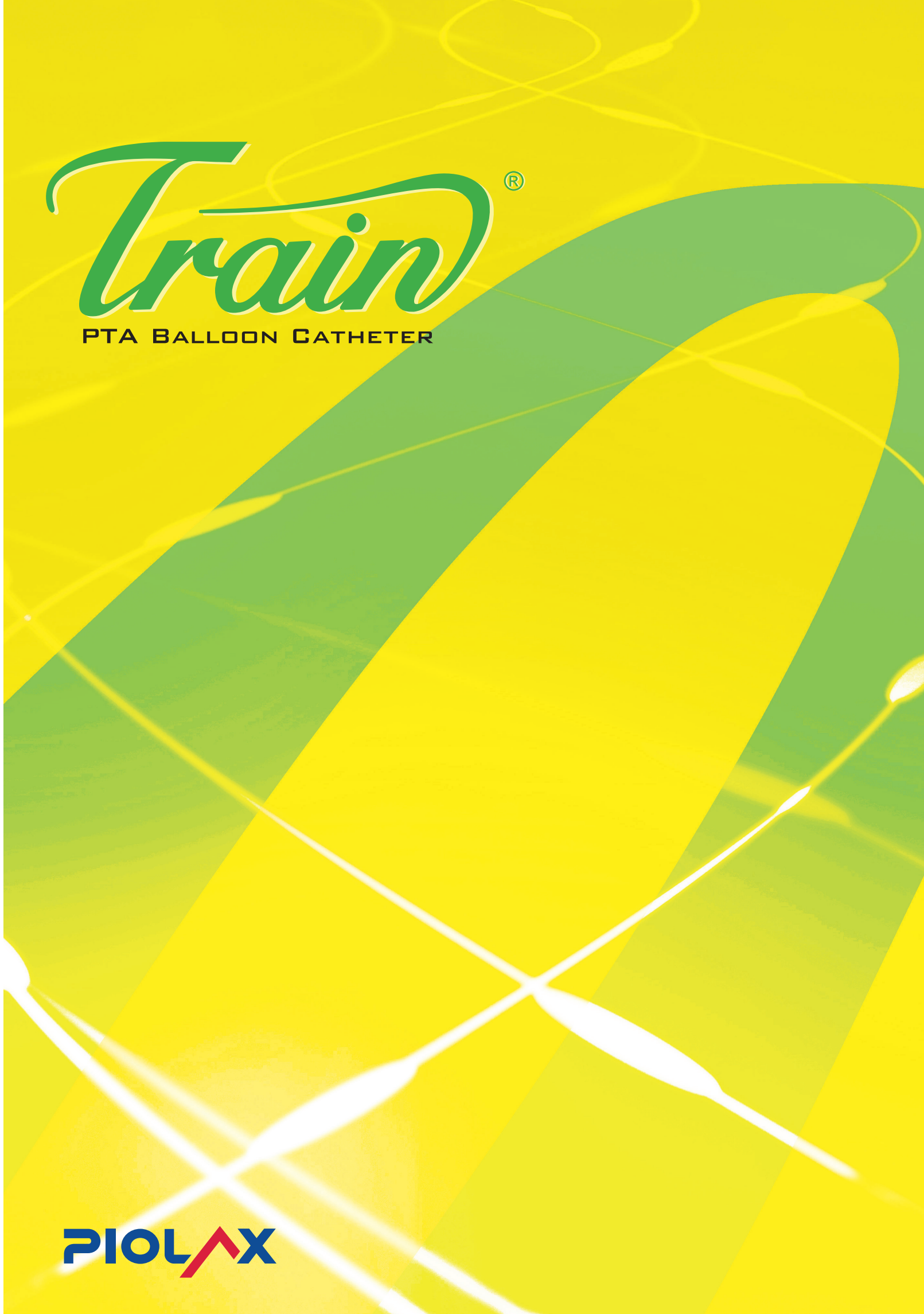

エントリーは小さく、病変部位はしっかり拡張可能なバルーンカテーテル。

「バルーンダイレータ」ならぬ「ダイレーターバルーン」コンセプト。

「屈曲蛇行した血管」、「急峻に分岐する血管」、「タイトな狭窄・閉塞部位」、「吻合部付近の病変」、

これら病変部へ挿入されたガイドワイヤにスムーズに追従し、

クロスする血管拡張用バルーンカテーテル。

それが Train です。

1

テーパードロングチップ
(親水性コート)

親水性コーティングを施した先端
30mmの“ロングチップ”がスムーズな
トラッカビリティとクロスナビリ
ティを実現します。

2


ノン・コーティングの
バルーン部

狭窄部をとらえ、拡張時のスリッピング
を予防します。

3

ハイレッシャーバルーン

RBP 2,027kPa (20atm)
※6mm は 1,824kPa (18atm)

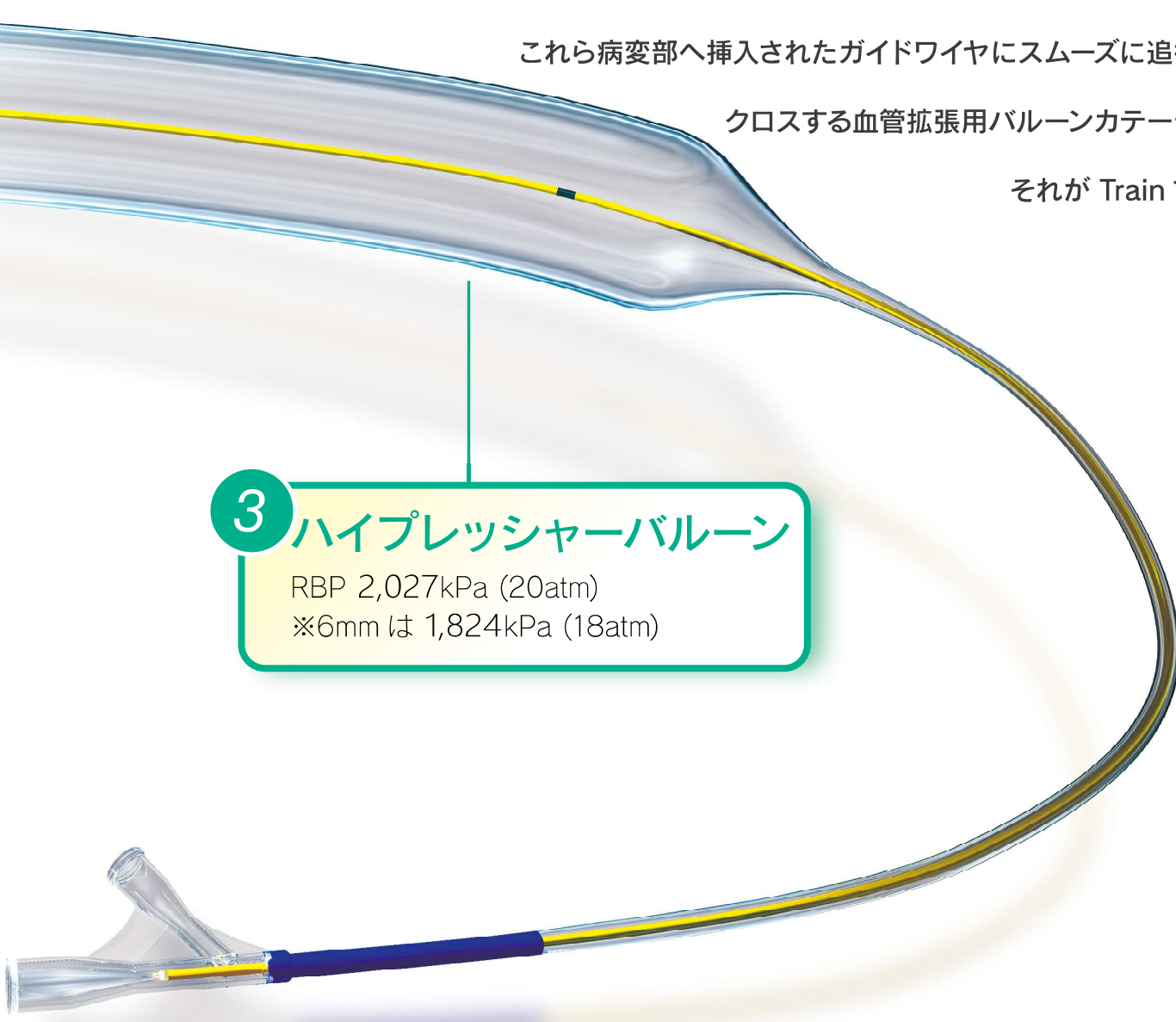

Train Balloon Compliance

推奨拡張圧 最大拡張圧

圧力			kPa (atm)	912 (9)	1,013 (10)	1,115 (11)	1,216 (12)	1,317 (13)	1,419 (14)	1,520 (15)	1,621 (16)	1,723 (17)	1,824 (18)	1,925 (19)	2,027 (20)	2,128 (21)	2,229 (22)	2,330 (23)	2,432 (24)	2,533 (25)
バルーン径	4.0mm	× 20mm		3.78	3.83	3.88	3.93	3.96	4.00	4.03	4.05	4.08	4.10	4.12	4.15	4.17	4.20	4.22	4.25	4.27
		× 40mm		3.81	3.86	3.91	3.95	3.99	4.02	4.05	4.08	4.10	4.12	4.15	4.17	4.20	4.22	4.25	4.28	4.31
	5.0mm	× 20mm		4.56	4.66	4.76	4.84	4.91	4.97	5.02	5.07	5.11	5.15	5.19	5.23	5.27	5.31	5.35	5.39	5.44
		× 40mm		4.51	4.62	4.73	4.81	4.88	4.95	5.01	5.05	5.10	5.14	5.18	5.22	5.25	5.29	5.34	5.38	5.43
	6.0mm	× 20mm		5.53	5.66	5.78	5.87	5.93	6.02	6.08	6.13	6.19	6.24	6.29	6.34	6.40	6.46	6.53	6.59	6.66
		× 40mm		5.65	5.77	5.87	5.96	6.03	6.10	6.16	6.22	6.27	6.33	6.39	6.45	6.51	6.57	6.63	6.72	6.62