




透析シャントPTA用バルーンカテーテルをしっかりとサポートし病変部位まで運ぶことをコンセプトに開発したガイドワイヤ。Ti-Ni合金を芯線とした独自のショートテーパ設計により0.018inchインターベンションの様々な場面で使用可能。それが“Buddy” (バディ) マイクロガイドワイヤです。



製品特性

- 1 **耐キンク性(耐変形性)に優れたチタンニッケルシャフト採用**
●手技に伴うヘタリや屈曲のきつい血管でのキンクに対する高い耐久性があります。
- 2 **安全性を重視した最先端部**
●ガイドワイヤ先端の血管に与えるストレスを減らすため、柔軟加工を施しました。
- 3 **サポート性の向上**
●独自のショートテーパ設計により、短い挿入長でもしっかりとバルーンカテーテルをサポートします。
- 4 **良好な視認性**
●先端2.5cmをエックス線不透過にすることで正確な先端位置が確認出来ます。
- 5 **全長に渡る親水性コーティング**
●潤滑性を増すことで、病変部位への滑らかなアクセスとバルーンカテーテルの追従性を高めます。

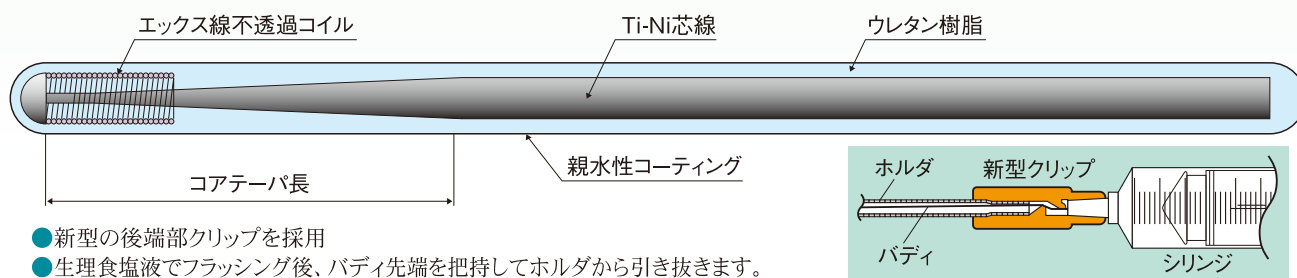

バディ(Buddy) スタンダードタイプ

カタログ番号	全長	先端形状	外径	エックス線不透過長	コアテーパ長	JANコード
BUD18-100A30	100cm	アングル30	0.46mm(0.018inch)	2.5cm	8.5cm	4545428018849
BUD18-100A60		アングル60				4545428018863
BUD18-160A30	160cm	アングル30				4545428018856
BUD18-160A60		アングル60				4545428018870

バディ(Buddy) ロングテーパタイプ

カタログ番号	全長	先端形状	外径	エックス線不透過長	コアテーパ長	JANコード
BUD18-100A30L	100cm	アングル30 ロングテーパ	0.46mm(0.018inch)	2.5cm	15cm	4545428020408
BUD18-100A60L		アングル60 ロングテーパ				4545428020422
BUD18-160A30L	160cm	アングル30 ロングテーパ				4545428020415
BUD18-160A60L		アングル60 ロングテーパ				4545428020439

- 販売名: ハイドロフィックZ
 - 承認番号: 21600BZZ00537000
 - 医療機器分類: 高度管理医療機器(クラスIV)
 - 一般的名称: 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ
 - 保険医療材料請求分類: 血管造影用ガイドワイヤー(3) 微細血管用
 - セット内容: ガイドワイヤ、トルクデバイス、インサータ
 - エチレンオキシドガス滅菌済み
- 本品は再使用不可のディスposable製品です。本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】
PIOLAX 株式会社 **パイオラックス メディカル デバイス**
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
 TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

C-BUD1705第4版SW