



MICRO GUIDEWIRE  
**CHASER**

PIOLAX

「トータルバランス」を重視し開発された0.016inchガイドワイヤ。  
優れた付形性と高い耐久性が安定した操作性を発揮します。  
それが“CHASER(チェイサー)”です。

## 1 リシェイプ機能

独自の「先端コイル構造」技術により“容易に”、“繰り返し”付形が可能となりました。

## 2 耐久性に優れた芯線


芯線に高抗張力SUSを採用し、屈曲蛇行の多い腹部血管においてもクセが付き難く、安定した使用感が得られます。

## 3 シャフト剛性

長年の臨床経験から蓄積してきたノウハウに基づき“サポート性”と“柔軟性”を両立した剛性バランスとしました。

## 4 潤滑性能

実績のあるPVPコーティングを全長にわたり採用し、安定した操作性と耐久性を実現しました。

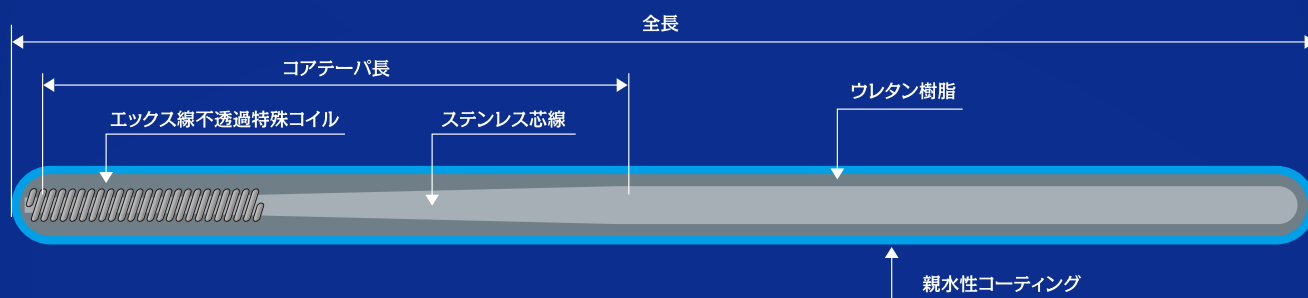

### 製品規格

カタログ番号	全長	先端形状	外径	エックス線不透過長	コアテーパ長	JANコード
CS16-145	145cm					4545428034962
CS16-165	165cm	ストレート	0.41mm (0.016inch)	5cm	35cm	4545428034979
CS16-180	185cm					4545428034986

- 販売名：バイオラックス親水性ガイドワイヤー
- 承認番号：20800BZZ00001000
- 医療機器分類：高度管理医療機器(クラスⅣ)
- 一般的名称：心臓・中心循環系カテーテルガイドワイヤ
- 保険医療材料請求分類：血管造影用ガイドワイヤー 微細血管用

- セット内容：ガイドワイヤ、シェイバ、トルクデバイス、インサータ
  - エチレンオキシドガス滅菌済み
- 本品は再使用不可のディスガーザブル製品です。  
本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。  
仕様・外觀につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】  
**PIOLAX** 株式会社 **バイオラックス メディカル デバイス**  
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】  
TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560