


ラングラー 内視鏡用ガイドワイヤ Wrangler


Endoscopic Guidewire

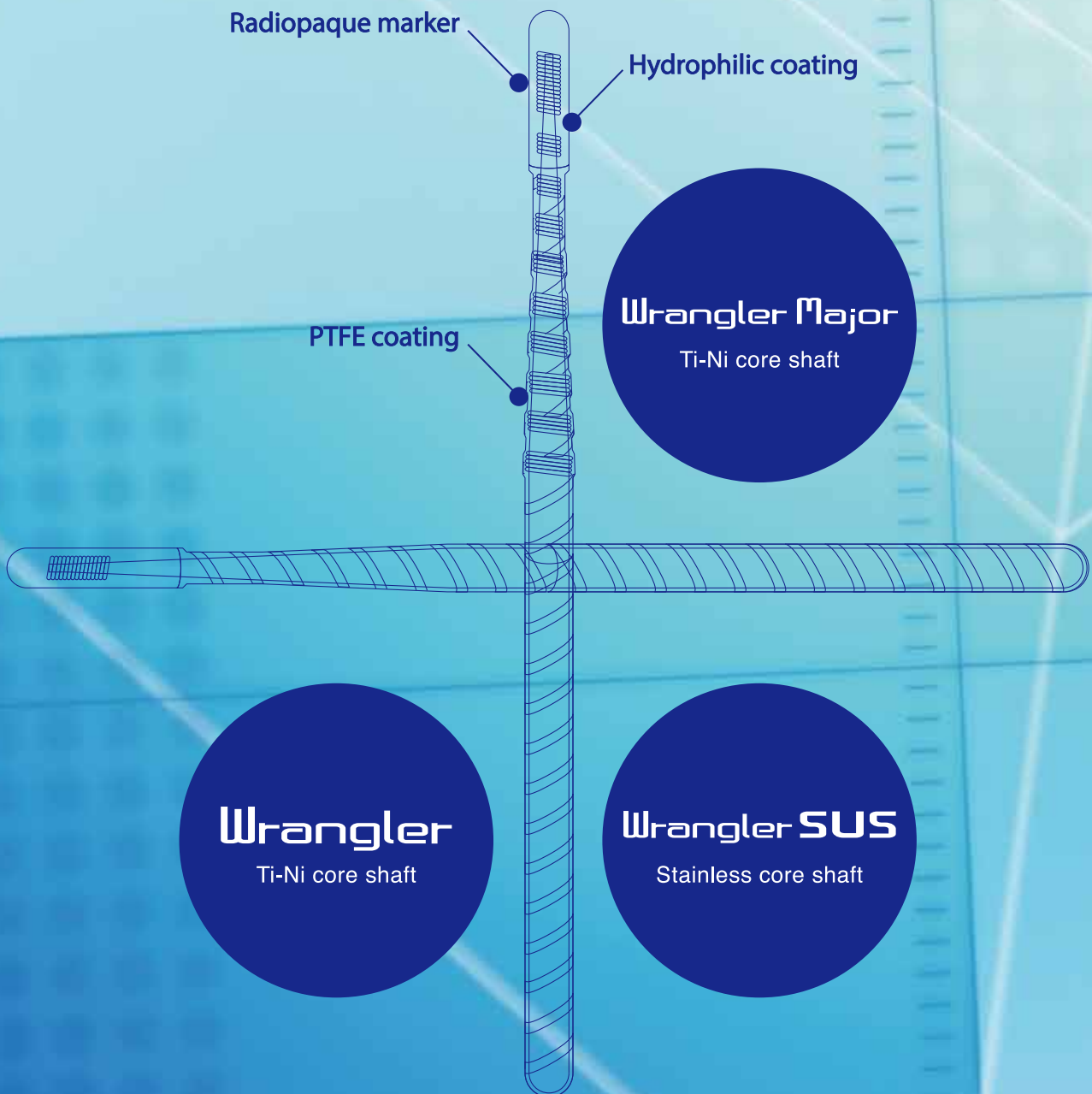

3大特長

1. 体内壁の損傷軽減

最先端に柔軟部があることで、体内壁や組織の損傷を軽減しています。

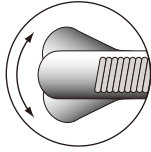

2. 視認性の向上

先端3cmにエックス線不透過マーカを使用することにより視認性を向上させています。




3. サポート性・高トルク性を実現



直線性の高いチタンニッケル芯線を使用し、サポート性・高トルク性を実現しました。さらに剛性の高いステンレス芯線を使用し、消化管ステント用としてご用意しています。

Wrangler [ストレート/アングル]

Type 0.035 [チタンニッケル(Ti-Ni)芯線] • Type 0.035 [ステンレス(SUS)芯線]

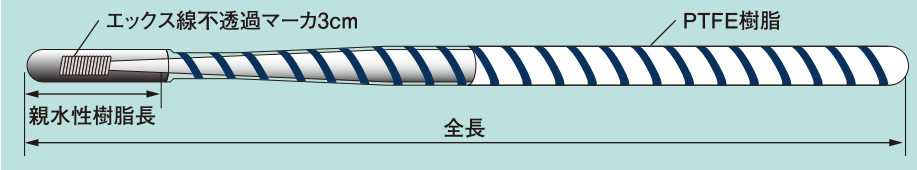


Type 0.025 [チタンニッケル(Ti-Ni)芯線]

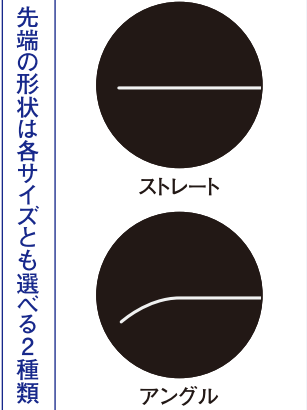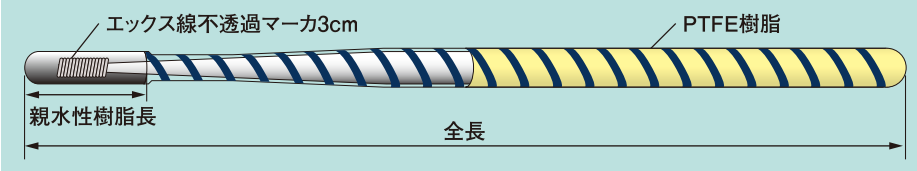

カタログ番号	タイプ	最大外径	全長	シャフト剛性	先端形状	親水性樹脂長	JANコード
GESS-3545A	0.035	0.83mm	450cm	スタンダード	ストレート	3cm	4545428012229
GESA-3545A					アングル		4545428012236
GEAS-3545S	0.035	0.89mm	450cm	スーパーハード ※ステンレス芯線	ストレート	5cm	4545428018603
GEAS-3526S			260cm				4545428018610
GESS-2545A	0.025	0.66mm	450cm	スタンダード	ストレート	3cm	4545428012267
GESA-2545A					アングル		4545428012274

Wrangler Major [アングル]

Type 0.035 [チタンニッケル(Ti-Ni)芯線] 1cm刻みでエックス線不透過マーカを配置することによりメジャー機能をプラスしたガイドワイヤです。

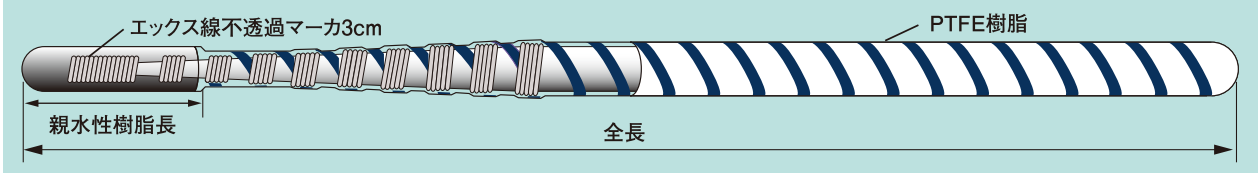

カタログ番号	タイプ	最大外径	全長	マーカ範囲	シャフト剛性	先端形状	親水性樹脂長	JANコード
MESA-3545M	0.035	0.85mm	450cm	20cm	スタンダード	アングル	5cm	4545428013837

- 販売名: パイオラックス親水性ガイドワイヤー-LZ
- 認証番号: 21600BZZ00536000
- 医療機器分類: 管理医療機器(クラスII)
- 一般的名称: 非血管用ガイドワイヤ

- 保険医療材料請求分類: PTCDワイヤー
- エチレンオキシドガス滅菌済

※本品は再使用不可のディスポザブル製品です。
 ※本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
 ※仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。