


■ 構造図

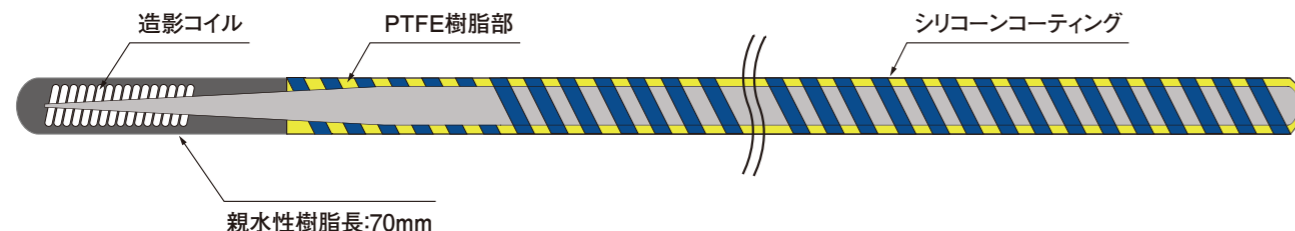

■ スペック表

カタログ番号	タイプ	全長	シャフト剛性	先端形状	JANコード
PXSA-2545	0.025	450 cm	スタンダード	アングル	4545428039202
PXSS-2545				ストレート	4545428039196
PXSA-3545	0.035		スタンダード	アングル	4545428038076
PXSS-3545				ストレート	4545428038069
PXHA-3545P			ハード	アングル	4545428039189

- 販売名: ガイドワイヤPX
- 認証番号: 301AFBZX00036000
- 医療機器分類: 管理医療機器(クラスII)
- 一般的名称: 非血管用ガイドワイヤ
- 保険医療材料請求分類: PTCDワイヤー

- エチレンオキサイドガス滅菌済み
- 本品は再使用不可の Disposable 製品です。
- 本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
- 仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。



※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】
PIOLAX 株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
 TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

進化する 革命の波

内視鏡ガイドワイヤに求められる3つの「S」

[Seekability] [Smoothability] [Supportability]

内視鏡ガイドワイヤのノウハウをこの1本に集約し、
全ての要素を高次元で融合させた内視鏡用ガイドワイヤ

それが、**SeekMaster** RevoWave です。

Smoothability

- 適度なコシと
High-Ridges coatingによる
スムーズなデバイスエクステンジ性
- Silicone coatingによる
造影剤擬着に対する優れた耐久性

Seekability

- トルク伝達性の高い
Ti-Ni芯線を採用
- High-Ridges coating
によるトルクロスを軽減

Tip design

- 5cmの不透過マーカを搭載
- Long Tip Angleにより
Seekabilityを
高めています

Supportability

- 高剛性Ti-Ni芯線による
適度なコシ

Aiming at treatment
that is kind to
people

