

Glitter


Micro Guidewire



「病変部突破性」「サポート性」「耐久性」さらに「吻合部挿入性」 透析シャントPTAに求められる機能を追求したガイドワイヤ

製品特性

- 1.最先端形状** | ペンシルチップ加工により優れた病変部突破性を発揮
様々な病変部、血管走行に合わせてアングル角度の選択が可能
- 2.剛性バランス** | 滑らかな挿入性とバルーンサポート性の両立を可能にしたテーバ設計
- 3.潤滑性能** | 先端ウレタン樹脂部は実績のあるPVPコーティングを採用
手元部は安定性に優れ、摺動性の高いPTFEコーティングを採用
- 4.耐久性** | 芯線には耐変形性に優れたTi-Niを採用
- 5.視認性** | 安全面からエクス線不透過長を5cmとし、タングステンコイル採用により視認性も向上

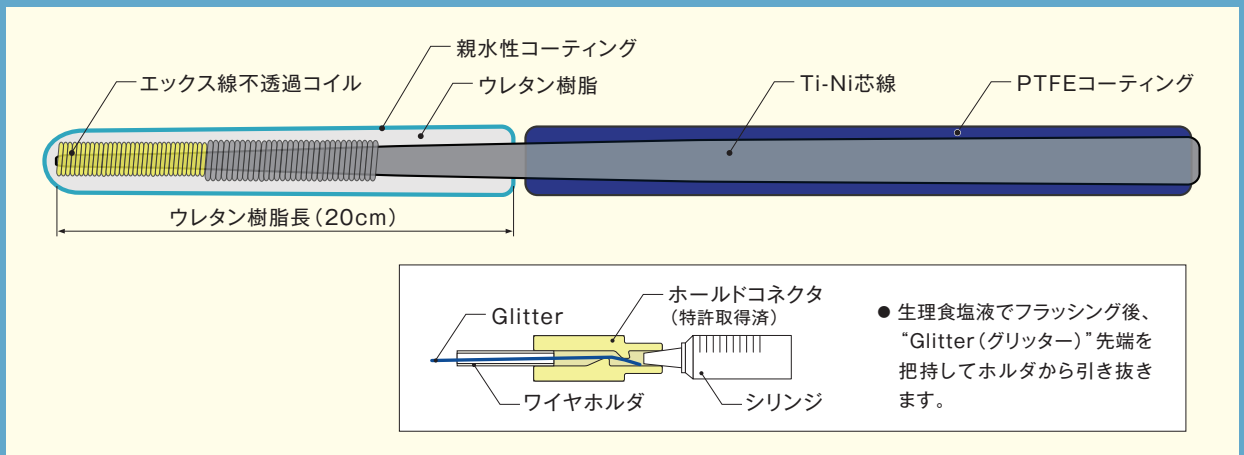

製品規格

カタログ番号	全長	先端形状	外径	エクス線不透過長	コアテーバ長	JANコード
GL18-100A30	100cm	アングル30	0.46mm (0.018inch)	5cm	28.5cm	4545428033866
GL18-100A60		アングル60				4545428033873
GL18-160A30	160cm	アングル30				4545428033880
GL18-160A60		アングル60				4545428033897

- 販売名：パイオラックスガイドワイヤー
- 承認番号：21000BZZ00619000
- 医療機器分類：高度管理医療機器(クラスⅣ)
- 一般的名称：心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ
- 保険医療材料請求分類：血管造影用ガイドワイヤー(3)微細血管用

- セット内容：ガイドワイヤ・トルクデバイス・インサータ
- エチレンオキサイドガス滅菌済み

※本品は再使用不可のディスposable製品です。
 ※本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
 ※仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】

PIOLAX 株式会社 **パイオラックス メディカル デバイス**
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560