




# RAINBOW

Hydrophilic Micro Guidewire

PIOLAX


## 1 先端シェイピング機能

複雑な血管走行に合わせて、先端形状の再成形が容易にできる「リシェイプタイプ」

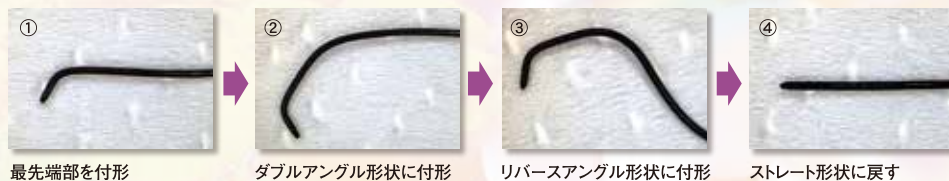

## 2 最先端部の柔軟性を向上

拡張ピッチのコイルを採用し、従来品の先端突き当て荷重を半分以下に低減

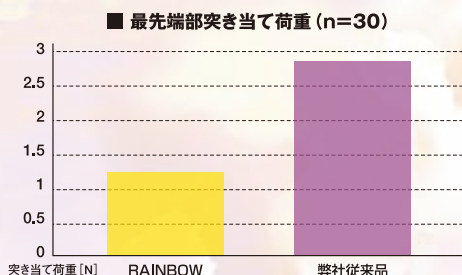

## 3 1:1で伝わるトルク伝達性能


真直加工を施したステンレス芯線を採用し、手元のトルク操作が先端まで伝わる操作性を実現

## 4 全長にわたる親水性コーティング

潤滑性を増すことで、マイクロカテーテルの追従性を向上

## 5 良好なエックス線透視下での視認性

金メッキタングステンコイルを採用し、優れた視認性を確保

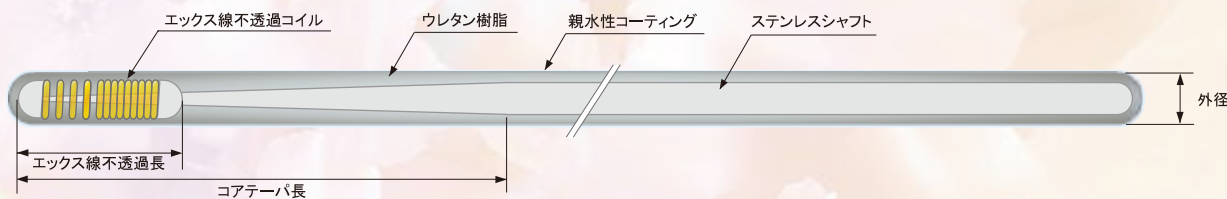

**RAINBOW** ハードシャフト…併用医療機器の「追従性をサポート」する剛性変化です。

カタログ番号	全長	先端形状	外径	エックス線不透過長	コアテーパ長	JANコード
GTHS-1610	100cm	ストレート (リシェイプタイプ)	0.41mm (0.016inch)	3.5cm	12cm	4545428005979
GTHS-1620L	205cm					4545428032227
GTHS-1626L	260cm					4545428032234

**RAINBOW IRIS** フロッピーシャフト…マイクロガイドワイヤの「選択性能を重視」した剛性変化です。

カタログ番号	全長	先端形状	外径	エックス線不透過長	コアテーパ長	JANコード
GTFS-16135	135cm	ストレート (リシェイプタイプ)	0.41mm (0.016inch)	5cm	40cm	4545428018665
GTFS-1616	160cm					4545428032227
GTFS-1618	180cm					4545428032234

【IRIS】イリスとはギリシャ神話の「虹の女神」です。  
先生方と患者様の虹の懸け橋に…。そんな思いを込めて開発した親水性マイクロガイドワイヤです。

- 販売名：パイオラックス親水性ガイドワイヤー
- 承認番号：20800BZZ00001000
- 医療機器分類：高度管理医療機器(クラスIV)
- 一般的名称：心臓・中心循環系カテーテルガイドワイヤー
- 保険医療材料請求分類：血管造影用ガイドワイヤー・微細血管用

- エチレンオキサイドガス滅菌済み
  - セット内容：ガイドワイヤ、シェイパ、トルクデバイス、インサータ
- 本品は再使用不可のディスposable製品です。  
本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。  
仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】 **PIOLAX** 株式会社 **パイオラックス メディカル デバイス**  
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】  
TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560